MODE D'EMPLOI MINI MICROSCOPE ELECTRONIQUE ZOOM X800 USB PORTABLE 8 LED 2 MP

Y-mmd3





1. Embout USB 2. LED 3. Bouton pour les photos 4. Bouton pour régler la lumière
5. Bouton pour régler la forme 6. Pour faire la mise au point 7. Bouton de réglage de la hauteur et de l'angle

1 . Méthode d'installation du logiciel sur PC Windows


A. Installation du logiciel


1. Dans la barre de recherche saisissez : http://soft.hvscam.com et entrez, veuillez sélectionner la version dont vous avez besoin Windows / mac / acmcap. Ensuite, téléchargez le logiciel, comme indiqué sur l'image ci-dessous.




2. Double cliquez sur 

Et ouvrez. Les informations suivantes apparaîtront. Ensuite, cliquez sur l'étape suivante.

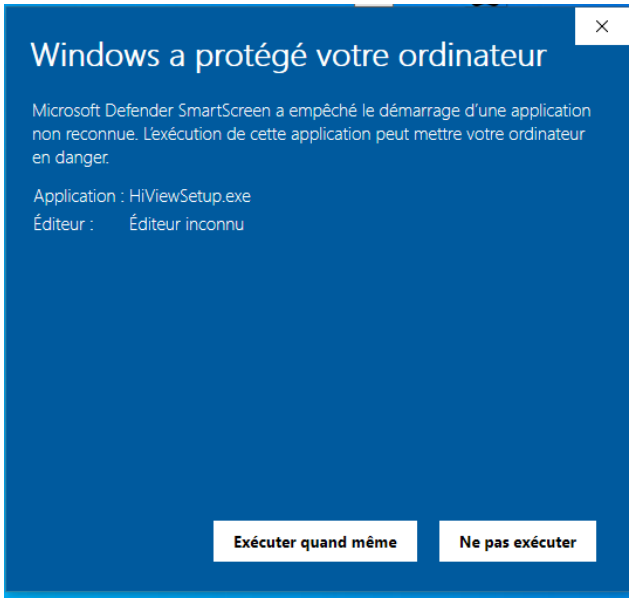


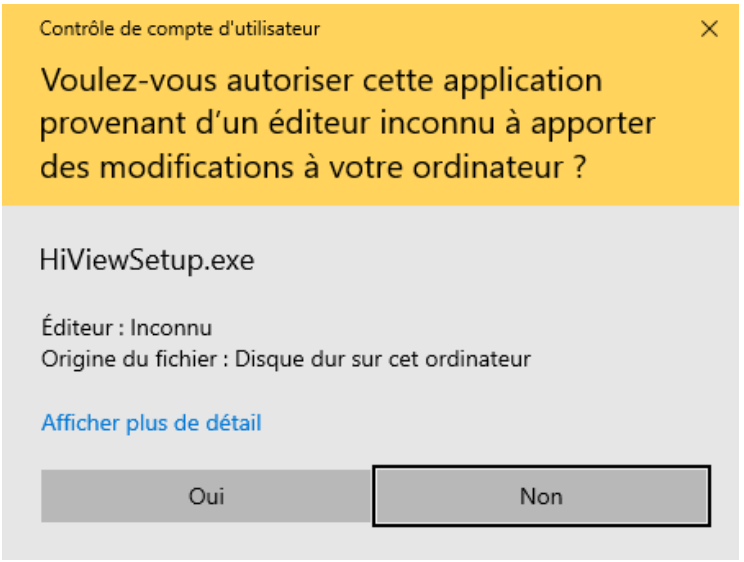


3. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir le contrat de licence va s'afficher, cliquez sur « accepter ».

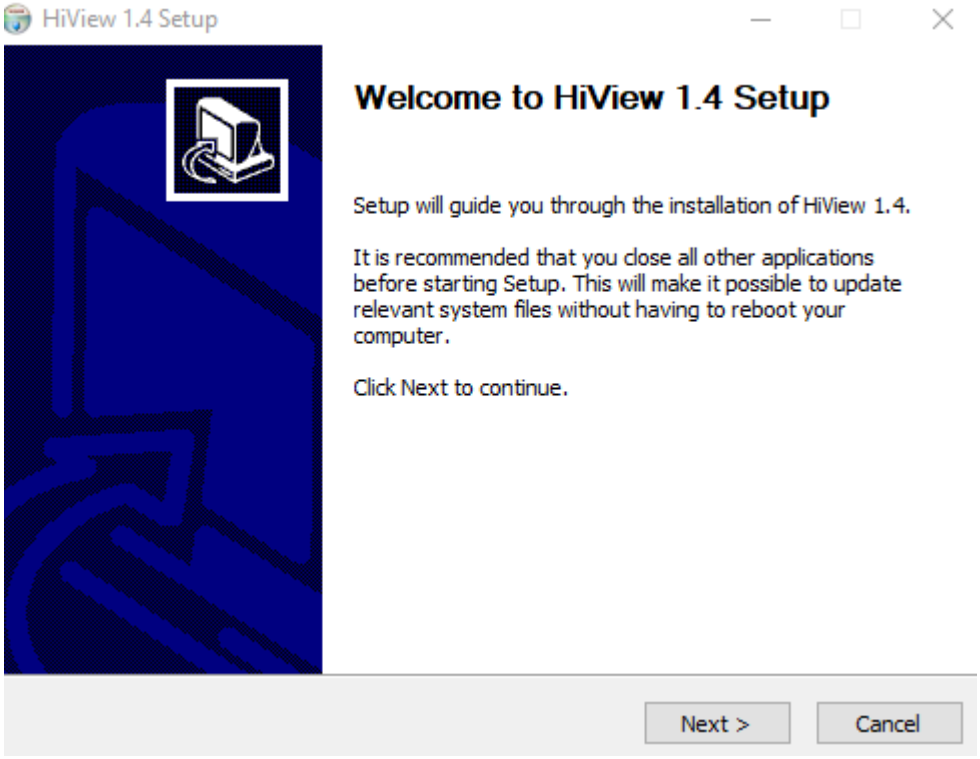

4. Accéder aux informations suivantes sélectionnez le site d'installation et cliquez sur installer.

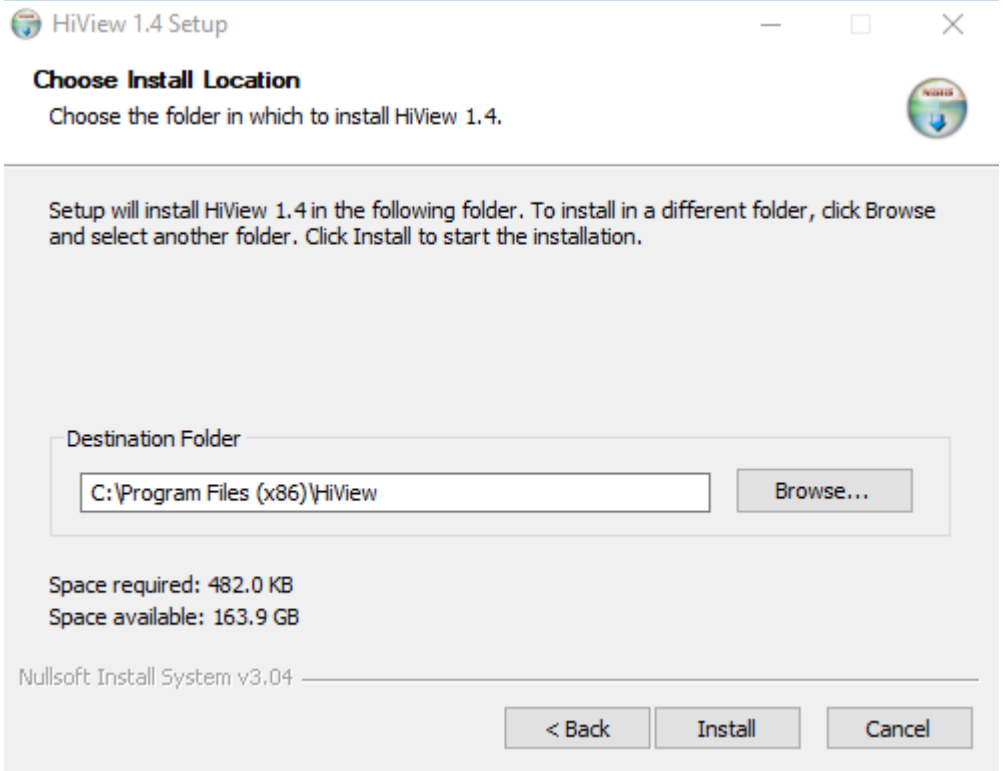

6.Une fenêtre avec les informations suivantes va s'afficher, cliquez sur Terminer, l'ordinateur va installer automatiquement le logiciel.

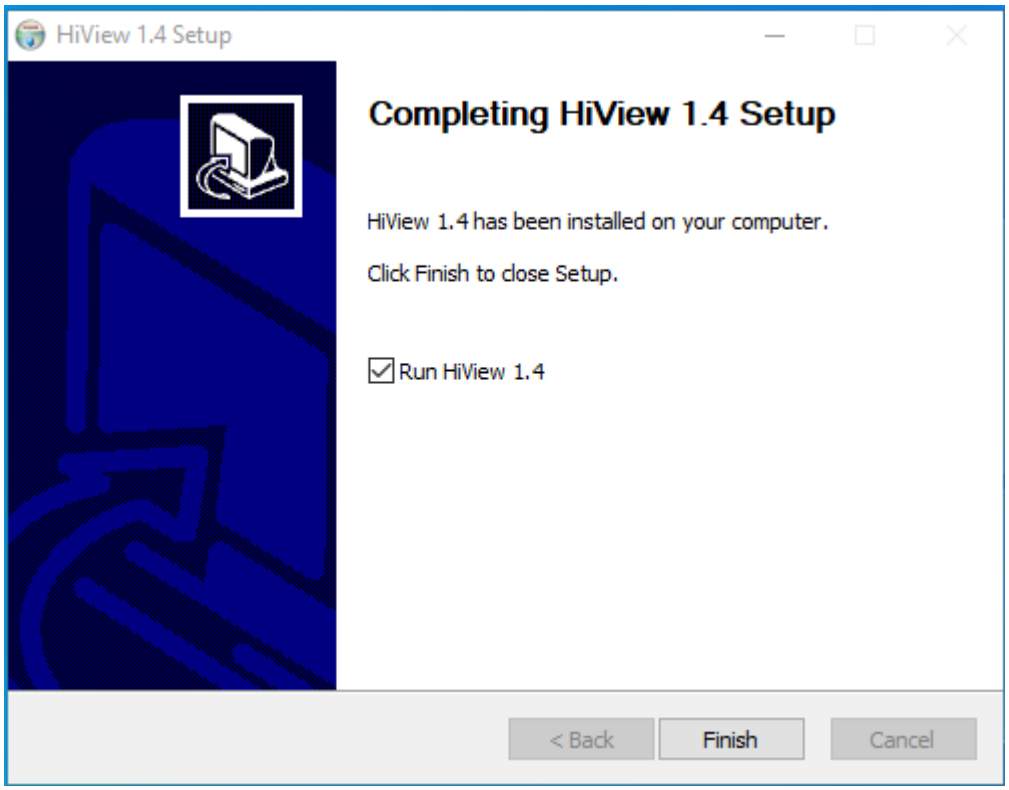


B. La prise en main du microscope

Le démarrage du microscope


1.Brancher le microscope à l'ordinateur via le câble USB. Ouvrez le logiciel, vous pouvez voir l'interface ci-dessous après avoir ouvert le logiciel :



2. Cliquez sur Equipment dans la barre de menu. Après cliquer sur ouvrir une fenêtre va s'ouvrir.

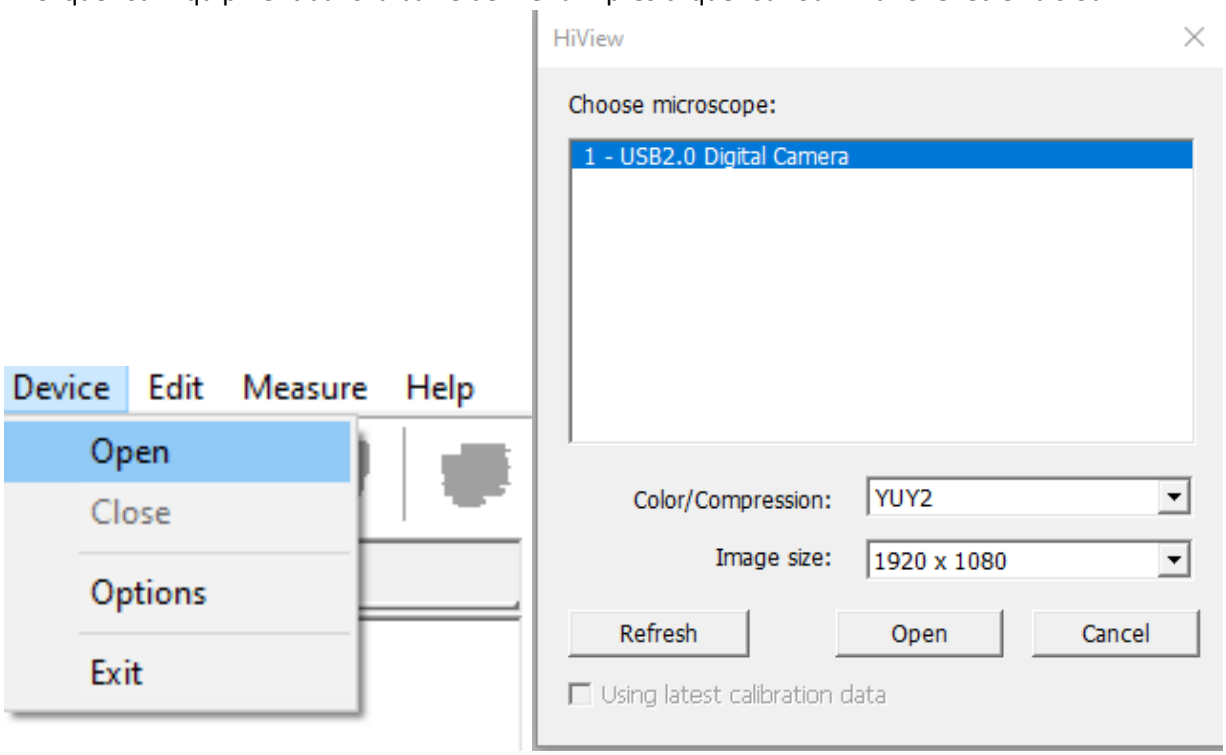


Comme pour l'image si dessus, sélectionner le nom de votre microscope (généralement USB camera). Sélectionner ensuite dans couleur/compression soit YUY2 soit JPG. Après avoir avoir choisi cliquez sur ouvrir. L'image sera projetée en direct sur votre écran.

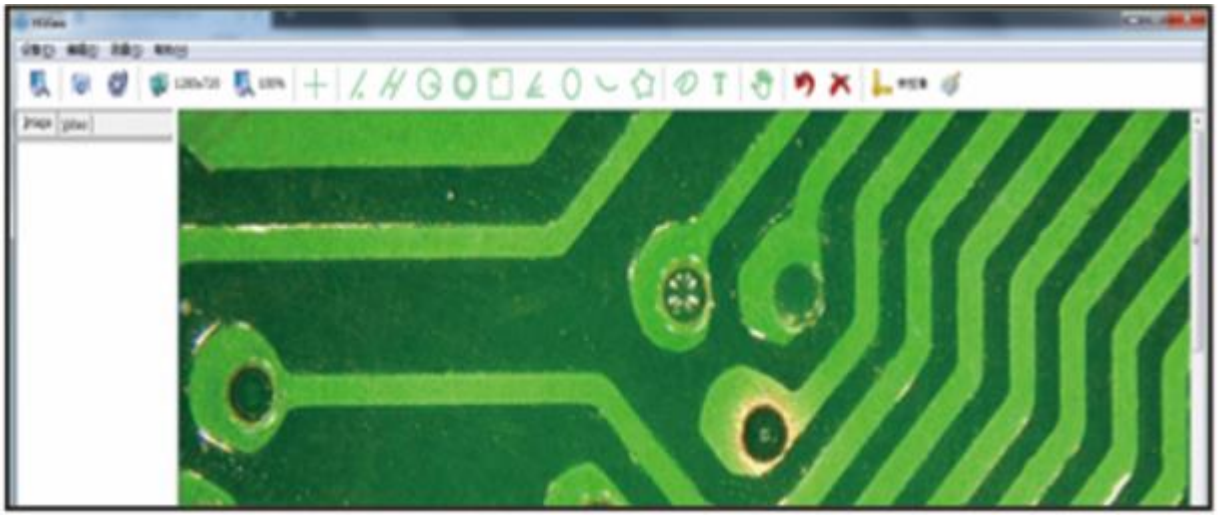

2. Méthode d'installation du logiciel sur MAC

A. Installation du logiciel

1. Dans la barre de recherche saisissez : http://soft.hvscam.com et entrez, veuillez sélectionner la version dont vous avez besoin Windows / mac / acmcap. Ensuite, téléchargez le logiciel, comme indiqué sur l'image ci-dessous.

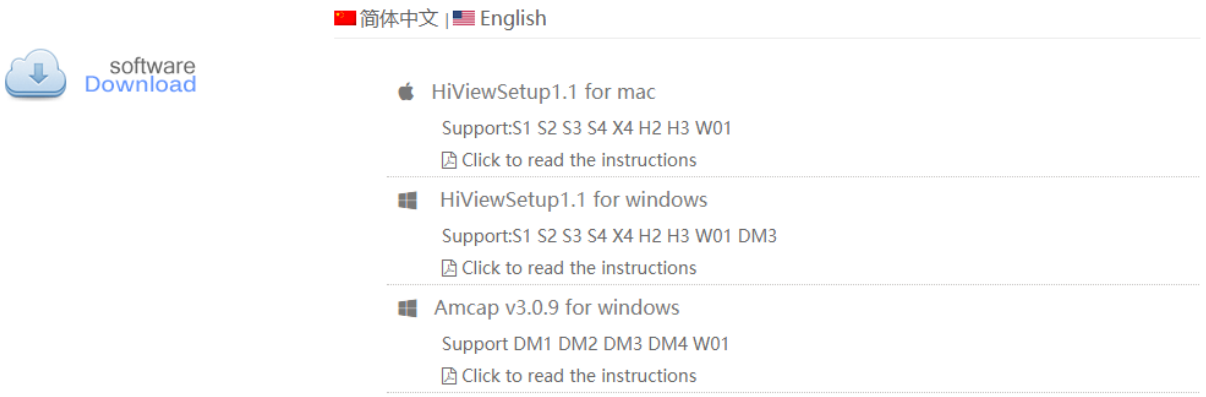

2. Double cliquez et ouvrez HiviewSetu.dmg. Une fenêtre d'information va s'ouvrir cliquez sur étape suivante :

B. La prise en main du microscope

1. Connectez votre microscope à un ordinateur Mac via le câble USB. Ensuite, double-cliquez sur 

pour ouvrir le logiciel. Si il y a eu sécurité, voici une solution :

1. Ouvrez les préférences système
2. Ouvrez « Sécurité et confidentialité », sélectionnez ensuite App Store et « accepter le développeur »
Sélectionner « laissez-ouvert »
3. L'interface d'ouverture du logiciel est comme indiqué sur la figure ci-dessous



Cliquer  dans le menu
Ouvrez l'image Choisir Hiview Si vous voulez autoriser la caméra
Cliquez sur oui

Les fonctions de la barre de menu



Les mesures :

Cliquez pour effectuer des opérations, y compris la courbe croisée, la ligne droite, la ligne parallèle, le cercle, le cercle concentrique, le rectangle, l'angle, l'ellipse, le dessin arbitraire de polygone d'arc, les mots, arrêter la mesure, supprimer récent, supprimer tout, calibration et options sous l'écran d'aperçu et écran photo.




L'étalonnage -> module l'image du microscope en une image claire et place la barre de correction à l'extrémité antérieure du microscope pour la correction, comme le montre la figure ci-dessous. 


Par exemple si la barre de spécification est de 0,1 mm par petite grille, la barre d'étalonnage du logiciel doit être dans la 22e petite grille de la barre d'étalonnage et l'entrée 2.2.

La formule de calcul est 0,1 mm x 22 mx 2,2 mm

(Note : La distance de l'objet doit être étalonnée pour chaque changement, et la mesure de chaque élément peut être effectuée après le recalibrage.)

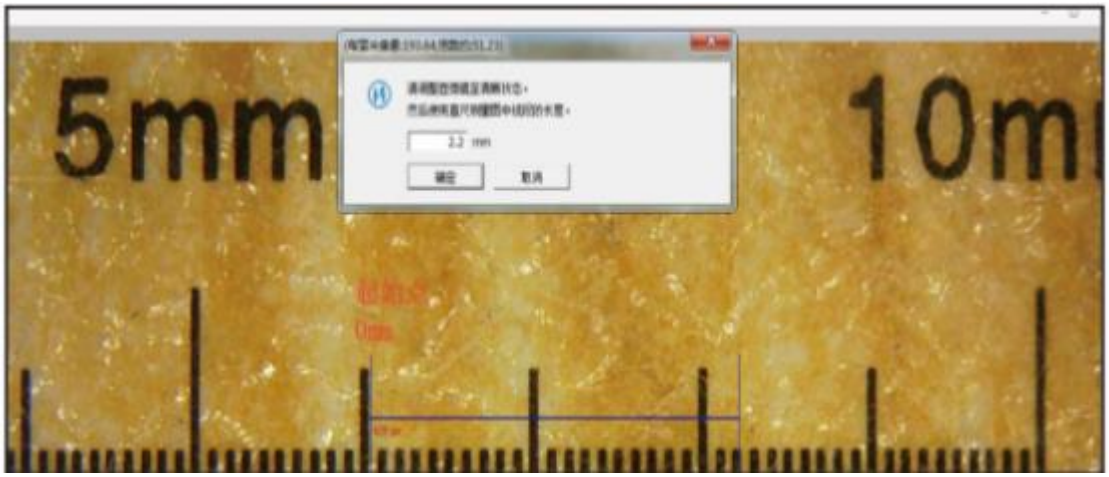

Option → La couleur de la ligne, la largeur de la ligne, la couleur du mot et la taille du mot peuvent être définies, comme indiqué sur la figure :

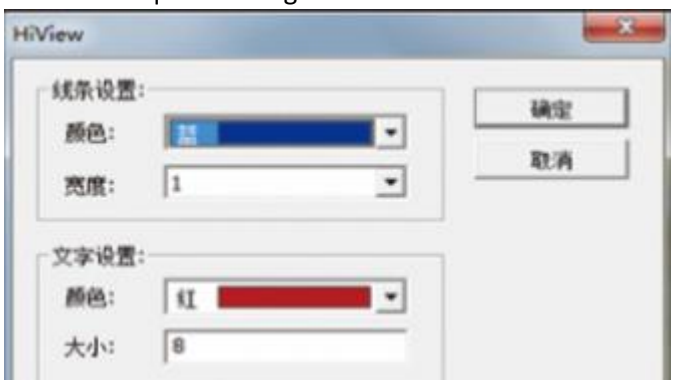

Aide :

Langues → Les langues disponibles sont le chinois, l'anglais, le japonais, le Russe, le Français, l'Allemand, l'Italien, l'Espagnol, le portugais, le coréens.

Les fonctions de la barre des taches :



- Ouvrir les options de l'appareil
- Enregistrement vidéo (vidéo)
- 1280 x 720 rapport de résolution
- Afficher la référence de ligne
- Dessiner des lignes parallèles
- Dessiner un cercle concentrique
- Dessiner un angle
- Dessiner un arc
- Dessin arbitraire
- Dessiner un cercle concentrique
- Retour à l'opération précédente
- Définir la largeur de la ligne, la taille et la couleur du mot
- Images rab (photographie)
- 100 % Modifier l'échelle d'affichage
- Afficher la ligne croisée de référence
- Dessiner un cercle
- Dessiner un rectangle
- Dessiner une ellipse
- Dessiner un polygone
- Texte
- Étalonnage du microscope
- Supprimer toutes les mesures



N’hésitez pas à contacter le fabricant pour toutes question concernant ce produit.