REF. : Y-MCB178



Montre Cardio Smartwatch

Manuel de l'utilisateur

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi

Table des matières

Description de la fonction du bracelet 3
- Description des boutons 3
- Instructions de charge 3
- Interface de la plaque de numérotation en mode veille : 4
- Message push 4
- Menu déroulant 4
- Nombre de pas 4
- Sommeil 4
- Musique Bluetooth 4
- Météo 4
- Mode sportif 5
- Mesure ECG 5
- Rythme cardiaque 5
- Pression artérielle 5
- Oxygène sanguin 5
- Réveil 5
- Rappel sédentaire 5
- Chronomètre 5
- Trouver un téléphone portable 6
- Caméra à distance 6
- Réglages 6

Application Bind Fundo 7

Méthode de téléchargement APP....7
Scannez le code QR pour télécharger....7
Recherche sur le marché des applications à télécharger....7
Lier Bluetooth....7
Non branché :....7
Lier à l'application Fundo :....7
Rechercher des appareils....7
Synchronisation des données....8
Message push....8
Rappel d'appel....8
Notification par SMS....8
Autres notifications de message d'application....8
WeChat sports....8
Mode Ne pas déranger....8
Rappel de boisson....8
Rappel sédentaire....9
Rappel de réveil....9
Mode rappel....9
Détection de la fréquence cardiaque....9
Mise à jour du Firmware....9
Délier....9
FAQ :....9
Garantie....10

Merci d'avoir choisi notre montre intelligente. Vous pouvez lire ce manuel et avoir une compréhension approfondie de l'utilisation et du fonctionnement de l'équipement. La société se réserve le droit d'apporter des modifications au contenu de ce manuel sans préavis.

Le produit inclut : l'emballage, le manuel, la montre connectée et le chargeur.

Description de la fonction du bracelet


Description des boutons



A. Appuyez et maintenez le bouton de l'interrupteur, appuyez brièvement pour verrouiller l'écran / allumer l'écran
B. Retour à l'interface de niveau supérieur

Instructions de charge

La charge magnétique est comme indiqué ci-dessous :

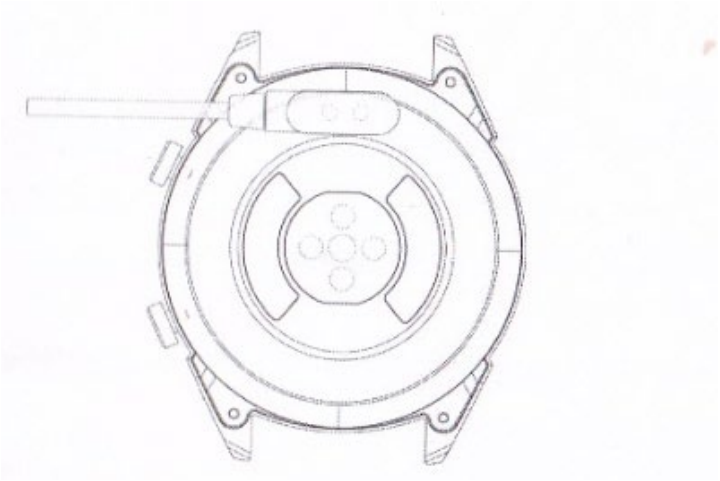

Sachez que les deux contacts du câble USB ne sont pas autorisés à entrer en contact avec le conducteur en même temps, sinon cela ferait brûler le circuit.

Interface de la plaque de numérotation en mode veille :

1. Glissez vers la droite pour ouvrir l'interface de message push ;
2. Faites glisser vers le bas pour ouvrir le menu déroulant qui affiche la luminosité, les paramètres, ne pas déranger. Balayez vers la gauche pour ouvrir l'interface météo
3. Glissez vers le haut pour ouvrir l'interface de la liste du menu principal
4. Appuyez et maintenez l'interface de la plaque de numérotation en mode veille pour balayer et basculer. Appuyez et maintenez après avoir sélectionné pour régler avec succès.

Message push

Faites glisser vers la droite l'interface de veille pour ouvrir l'interface de message push et lier le bracelet avec l'application Fundo. Lorsque l'autorité de notification est activée, le nouveau message reçu par la barre de notification mobile sera poussé vers le bracelet. Un total de 8 morceaux de messages peuvent être enregistrés. Le message reçu après le 8ème message écrasera un à un le message précédemment reçu.

Menu déroulant

Faites glisser l'interface de veille vers le bas pour ouvrir l'interface du menu déroulant

1. L'icône de gauche affiche l'état de la connexion Bluetooth
2. Cliquez sur l'icône du milieu pour activer / désactiver le mode Ne pas déranger. Lorsque le mode Ne pas déranger est activé, la vibration est activée uniquement pour Rechercher le bracelet et l'alarme ;
3. L'icône de droite peut être utilisée pour régler la luminosité de l'écran ;

Nombre de pas

Le nombre de pas est activé par défaut. Cette interface affiche le nombre actuel d'étapes dans le bracelet. Les données sont effacées tous les jours à 12 h.

Sommeil

Période de surveillance du sommeil : de 21h00 à 9h00 le lendemain, une fois que le bracelet a généré des données et quitte la surveillance du sommeil, il lie l'application Fundo pour synchroniser les données de sommeil de la fin du bracelet à la fin de l'APP.

Musique Bluetooth

Android : après avoir connecté le bracelet dans les paramètres du téléphone, ouvrez le lecteur de musique, jouez / mettez en pause et changez de chanson à la fin du bracelet ; (pas besoin de lier dans l'application, si elle est déjà liée, veuillez la dissocier et vous connecter dans les paramètres du téléphone)

IOS : ouvrez le lecteur de musique une fois le bracelet lié à l'application, jouez / mettez en pause et changez de chanson à la fin du bracelet

Météo

Une fois que le téléphone est connecté au réseau et que l'application a acquis les informations météorologiques, liez le bracelet à l'application et poussez les informations météorologiques de l'application sur le bracelet.

Mode sportif (marche, course, vélo, randonnée, natation, football, basket-ball, tennis de table, badminton)

1. Sélectionnez le mode sportif correspondant et cliquez sur l'écran pour accéder au mode sportif correspondant après le compte à rebours 3,2,1 ; balayez vers la droite pour passer à la fin de l'interface sportive, cliquez sur pause pour revenir à l'interface sportive pour continuer le sport, cliquez sur le carré pour terminer le sport et enregistrer les données ;
2. Les données sportives peuvent être enregistrées lorsque la distance est supérieure à 200 mètres ou le temps supérieur à 5 minutes ; lorsque le sport se termine sans satisfaire à la condition, il demandera "les données sont trop peu pour être enregistrées".
3. Une fois le bracelet lié à l'application, cliquez sur la synchronisation sur l'interface d'historique des sports Fundo pour synchroniser les données d'historique des sports à la fin du bracelet et afficher la trajectoire et les données détaillées à la fin de l'application.

Mesure ECG

Il peut tester l'ECG et surveiller les statuts de l'ECG ;

Veuillez porter correctement le bracelet pendant le test. Une fois la fonction activée, touchez la position de l'écran tactile avec le doigt pour démarrer la mesure. Le test se termine à 60s. S'il est inférieur à 60 secondes, il vous invite à revenir à la page d'invite où le doigt doit être placé.

Rythme cardiaque

Portez le bracelet correctement sur le poignet gauche (main gauche / main droite) et entrez dans le menu de fréquence cardiaque pour une mesure continue de la fréquence cardiaque. Une fois le bracelet lié à l'application, les données de fréquence cardiaque sont synchronisées avec l'application en temps réel.

Pression artérielle

Portez le bracelet correctement sur le poignet (main gauche / main droite) et entrez dans le menu de la pression artérielle pour une mesure unique de la valeur de la pression artérielle. Une fois le bracelet lié à l'application, les données de pression artérielle peuvent être synchronisées avec l'application en temps réel.

Oxygène sanguin

Portez le bracelet correctement sur le poignet (main gauche / main droite) et entrez dans le menu oxygène sanguin pour une mesure unique de la valeur de l'oxygène sanguin. Une fois le bracelet lié à l'application, les données d'oxygène sanguin peuvent être synchronisées avec l'application en temps réel.

Réveil

Lier le bracelet à l'application et régler le réveil synchronisé dans l'application au bracelet.

Rappel sédentaire

Activer / désactiver le rappel sédentaire.

Chronomètre

Accédez à l'interface de chronométrage en cliquant sur le chronomètre, cliquez sur l'icône de démarrage pour démarrer le chronométrage et cliquez à nouveau pour faire une pause. Balayez vers la droite pour quitter. Lorsque vous entrez à nouveau dans le chronomètre, le chronométrage précédent est effacé et le chronométrage est redémarré.

Trouver un téléphone portable

Cliquez sur Rechercher le téléphone mobile à la fin du bracelet pour afficher une boîte de dialogue une fois le bracelet lié à l'application.

Caméra à distance

Une fois le bracelet lié à l'application, cliquez sur l'appareil photo dans l'application et affichez l'icône de la caméra à distance sur le bracelet et allumez automatiquement l'appareil photo sur le téléphone mobile. Cliquez sur l'écran à l'extrémité du bracelet pour contrôler le téléphone afin de prendre des photos qui sont stockées à l'extrémité du téléphone mobile.

Réglages

Rappel sédentaire

Il est désactivé par défaut. Après avoir connecté l'APP, la fonction marche / arrêt à la fin de l'application peut contrôler la fonction à la fin du bracelet. La fonction peut être activée ou désactivée manuellement à la fin du bracelet, mais l'application n'est pas affectée

Levez-vous pour vous réveiller

Il est désactivé par défaut. Après avoir connecté l'APP, la fonction marche / arrêt à la fin de l'application peut contrôler la fonction à la fin du bracelet. Cette fonction peut être activée ou désactivée manuellement à la fin du bracelet, mais l'APP n'est pas affectée.

A propos

Afficher le nom Bluetooth, l'adresse Bluetooth et le numéro de version.

Rétablir les paramètres d'usine

Cliquez sur Restaurer les paramètres d'usine pour restaurer le bracelet à l'état d'usine.

Fermer

Après avoir cliqué sur Arrêter, le bracelet est désactivé.

Application Bind Fundo

Méthode de téléchargement APP

Scannez le code QR pour télécharger

Recherche sur le marché des applications à télécharger

- Android : recherchez Fundo sur Myapp, Wandoujia, Google Play et d'autres marchés d'applications à télécharger
- IOS : Rechercher Fundo dans l'App Store à télécharger

Pour Android et Iphone, l'icône d'application de Fundo après l'installation est la suivante : 

Lier Bluetooth

Non branché : 

Une fois le bracelet allumé, Bluetooth est toujours à l'état de recherche. Après avoir ouvert l'APK / APP, entrez des appareils plus connectés, cliquez sur Rechercher et sélectionnez le nom de l'appareil de bracelet correspondant pour lier le bracelet à l'application avec succès.

Lier à l'application Fundo : 

Synchronisation de l'heure du bracelet : Une fois le bracelet correctement lié à l'application, cliquez pour réaliser la synchronisation de l'heure et du format de l'heure du bracelet et du téléphone mobile

Rechercher des appareils

Une fois le bracelet lié à l'application, cliquez sur Rechercher le bracelet pour faire vibrer et réveiller l'écran du bracelet trois fois ;

Synchronisation des données

Une fois le bracelet correctement lié à l'application, les données de santé du bracelet peuvent être synchronisées avec l'application ; ouvrez l'interface de fréquence cardiaque, de sommeil et de sport pour sélectionner la date, cliquez sur l'icône dans le coin supérieur droit pour partager avec succès les données de l'interface actuelle sur le QQ, l'espace QQ, WeChat, le moment WeChat, Facebook, Twitter, etc. ;

Message push

Une fois le bracelet correctement lié à l'application, l'autorité de notification correspondante dans le système de téléphonie mobile est activée. Entrez une application de notification supplémentaire dans l'application, démarrez les applications tierces correspondantes.

Rappel d'appel

Activez le rappel d'appel dans l'application personnelle. Lorsque l'extrémité mobile reçoit un ou plusieurs appels entrants, le bracelet recevra un ou plusieurs rappels d'appel en même temps ;

Notification par SMS

Activez la notification par SMS dans l'application personnelle. Lorsque l'extrémité mobile reçoit un ou plusieurs SMS, le bracelet recevra un ou plusieurs rappels SMS en même temps ;

Autres notifications de message d'application

Activez la notification de message correspondante dans l'application personnelle, telle que WeChat, QQ, Facebook, Twitter, etc. Lorsque l'extrémité du téléphone mobile reçoit une ou plusieurs notifications de message d'application, l'extrémité du bracelet reçoit une ou plusieurs notifications de message correspondantes en même temps.

WeChat sports

Les données sportives du bracelet peuvent être synchronisées avec la liste de classement des sports WeChat. Suivez le compte officiel "Fundo health" pour sélectionner le périphérique de liaison et saisissez l'adresse MAC du périphérique pour la liaison. Une fois la liaison réussie, le compte officiel peut synchroniser les données sportives (adresse MAC : accéder à la vue du bracelet) ;

Méthode de reliure :

- La fin Android suggère la liaison à APP avant la liaison à WeChat
- L'extrémité IPhone n'a pas besoin de lier l'APP. Détachez d'abord et ignorez l'appareil dans les paramètres du téléphone, puis liez dans WeChat

Mode Ne pas déranger

Lorsque le mode Ne pas déranger est activé, seuls le bracelet Rechercher et le réveil ont un rappel de vibration.

Rappel de boisson

Réglez la période du début à la fin et la fréquence (minutes), cliquez pour entrer la réinitialisation, sélectionnez la date de rappel de l'eau (semaine), vérifiez le rappel de consommation et enregistrez. Lorsque l'heure de rappel de la boisson arrive, il vibre et affiche l'icône de boisson à la fin du bracelet.

Rappel sédentaire

Réglez la période du début à la fin et l'intervalle sédentaire (minutes), le seuil (étapes), cliquez pour entrer la réinitialisation pour sélectionner la date de rappel sédentaire (semaine). Lorsque le rappel sédentaire arrive, il vibre et affiche l'icône sédentaire à l'extrémité du bracelet.

Rappel de réveil

Cliquez sur le paramètre de rappel du réveil pour ajouter l'heure de l'alarme. Lorsque l'heure de l'alarme arrive, le bracelet affiche : l'icône et l'heure de l'alarme et vibre 20 fois ;

Mode rappel

a) Écran de réveil : tous les rappels autres que le réveil, le rappel de sédentaire et de boisson ne seront demandés qu'avec un écran lumineux à la fin du bracelet
b) b. Vibrer : Tous les rappels autres que le réveil, le rappel sédentaire et le rappel d'alcool ne seront déclenchés qu'avec des vibrations à la fin du bracelet ;
c) c. Écran de réveil + vibration : pour tout rappel, l'extrémité du bracelet n'affiche qu'un écran lumineux + vibration

Détection de la fréquence cardiaque

Réglez la période du début à la fin et l'intervalle de temps sédentaire (minutes), vérifiez le test de fréquence cardiaque et enregistrez

Mise à jour du Firmware

Détectez si la version du Firmware du bracelet est la dernière. Vous êtes invité à mettre à jour et à mettre à niveau vers la dernière version quand il y en a une nouvelle.

Délier

Une fois le bracelet lié à l'application, cliquez sur le nom de l'appareil connecté ou balayez vers la gauche pour annuler la liaison dans l'interface Plus. Ignorer le périphérique couplé dans les paramètres IPhone.

FAQ :

- N'exposez pas cet appareil à un refroidissement excessif ou à des conditions de surchauffe pendant une longue période, sinon il causera des dommages permanents.
- Pourquoi ne pouvez-vous pas porter de montre lorsque vous prenez un bain chaud ? Comme la température du bain est élevée, elle produira de la vapeur de masse qui est en phase gazeuse et caractérisée par un petit rayon de molécule. Il est facile de pénétrer dans l'espace du boîtier de la montre. Lorsque la température baisse, elle devient une goutte d'eau en phase liquide, ce qui est facile à provoquer un court-circuit dans la montre, ce qui endommage la carte de circuit imprimé et la montre.
- La montre ne peut pas démarrer ni se recharger : Si votre montre nouvellement reçue ne peut pas démarrer, c'est peut-être parce que la batterie est sous protection en raison d'une collision pendant le transport de la montre. Branchez le câble de charge pour activer la montre. Si votre montre ne peut pas démarrer en raison d'une batterie trop faible ou si la montre n'a pas été utilisée depuis longtemps, veuillez brancher le câble USB et charger pendant une demi-heure pour l'activation.

Garantie

1. S'il apparaît des problèmes de qualité causés par la fabrication des matériaux, la conception dans un délai d'un an (depuis le jour de l'achat), nous vous offrirons une garantie gratuite pour. Nous offrirons une garantie gratuite pour la batterie et l'adaptateur dans les 6 mois. Le local utilise normalement et correctement.
2. À propos de la faute causée par les raisons personnelles des utilisateurs, nous n'offrons pas de garantie gratuite, comme suit :
    a. Démonter ou remonter le produit
    b. Causé par la chute de l'impudeur
    c. Tout dommage artificiel ou mauvaise utilisation (tels que : faire pénétrer de l'eau dans l'hôte, l'éclatement de la force externe, les rayures des composants périphériques, etc.), tout cela n'entre pas dans le cadre de la garantie.
3. Lorsque vous demandez une garantie gratuite, vous devez fournir une carte de garantie avec le sceau du lieu d'achat et la date d'achat.
4. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez contacter le service client de la boutique que vous avez acheté chez
5. Veuillez faire des produits finaux la norme.

- Date d'achat :
- Code IMEI :
- Acheter un magasin :
- Signature du client :
- Signature du greffier :
- Timbre de la boutique :